


Dragon 200 Lab Burner

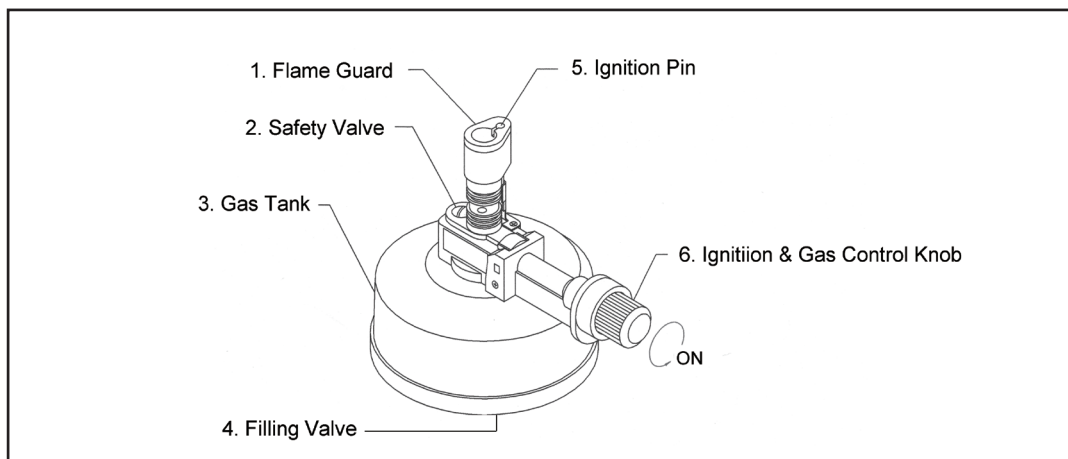

ATTENTION: This unit does not contain any butane gas when purchased. Please follow below to make it operational.

1. FUEL FILLING AND REFILLING

- Make sure the gas burner is switched off before filling.
- Reverse the unit upside down.
- Insert the container's nozzle vertically in a downward motion into the FILLING VALVE ④ on the bottom of the unit.
- When the fuel begins to overflow, remove the nozzle from the filling valve to stop the filling operation. It means the unit is full of gas.
- Allow a few minutes for the fuel to stabilize in the fuel tank.

2. IGNITION

- Turn the IGNITION BUTTON ⑥ to the left (counterclockwise) about 90 degree.
- Press the IGNITION BUTTON ⑥ to light the flame.

3. SHUT-OFF

Turn the IGNITION BUTTON ⑥ to right (clockwise) to decrease until the end to shut off the flame.

4. FLAME LENGTH ADJUSTMENT


After the ignition, turn the GAS CONTROL KNOB ⑥ to the left (counterclockwise) to increase the flame; to the right (clockwise) to decrease the flame and shut if off.

4. WARNING

- Do not touch FLAME GUARD ① when hot.
- Keep out of reach of children.
- Do not drop. Do not operate or store in temperature exceeding 50°C.
- Do not try to disassemble the unit.



Dragon 200 電子點火式噴燈

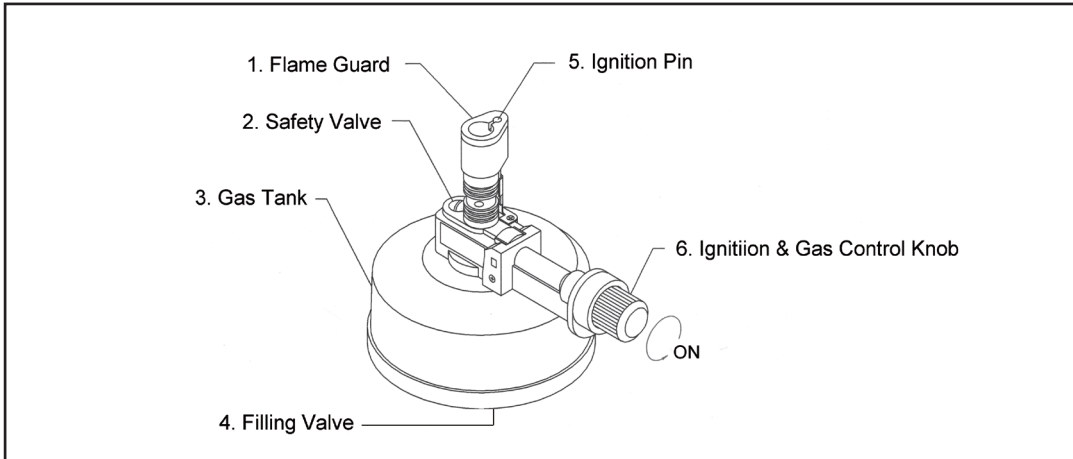

注意：在銷售時瓦斯爐中未充灌瓦斯，使用前請先依說明灌入純淨丁烷瓦斯。

一. 充灌瓦斯

- 檢查瓦斯控制鈕 ⑥，確定已經在關閉位置，反轉瓦斯爐使爐底朝天。
- 將瓦斯罐的充氣嘴垂直插入充氣閥 ④ 中央孔中，壓緊瓦斯罐。
- 等待有大量瓦斯從充氣閥溢出時即已完成瓦斯充灌。

*注意:

- 請在通風良好的地方充灌瓦斯。
- 切勿在高溫熱源或明火附近充灌瓦斯。
- 如果是使用後重新充灌瓦斯，請待瓦斯爐體的溫度降低後再充灌。

二. 點火

- 將紅色瓦斯控制鈕 ⑥ 向左旋轉約90度。
- 壓入紅色瓦斯控制鈕 ⑥ 即可點著爐火。

三. 調整火焰大小

- 瓦斯控制鈕 ⑥ 向左旋轉可以加大火焰。
- 瓦斯控制鈕 ⑥ 向右旋轉可以關小火焰。

四. 熄火

將瓦斯控制鈕 ⑥ 向右旋轉到底並略用力鎖緊即可熄滅爐火。

五. 注意事項

- 請勿將瓦斯爐儲存在溫度超過攝氏50度的處所。
- 切勿讓瓦斯爐自高處摔落堅硬的地面。
- 切勿自行分解組裝瓦斯爐。
- 切勿任由兒童把玩以免造成危險。

