

MF, 磁式過濾漏斗

容器不受限

簡便易用

環保耐用



產品特色



One to Many

- 1 ◆側邊真空接頭設計，能搭配各式廢液瓶、血清瓶、真空瓶



單手簡易操作

- 2 ◆獨特磁力設計，在高度密封性下仍能單手操作
◆底座定位環設計，放置濾膜時能快速定位
◆濾膜夾口設計，夾取濾膜更方便



堅固耐用

- 3 ◆PPSU (聚苯硫)和 PES (聚醚硫)材質提供良好的耐化學性
◆可高溫高壓蒸氣滅菌(Autoclave)

產品應用

- ◆一般過濾
- ◆水質檢測



國際認證

RoHS

適用各式真空瓶、玻璃瓶、血清瓶



產品規格

型號	MF 3 / MF 3 Pro	MF 5 / MF 5 Pro
漏斗容積	300 ml	500 ml
有效過濾面積	13.1 cm ²	13.1 cm ²
濾膜直徑	47 mm	47 mm
漏斗刻度	50 ml	50 ml
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8

產品材質

型號	MF Pro	MF
過濾杯	PPSU	PES
過濾基座	PPSU	PES
濾膜墊片	PPSU	PES
側邊接頭	PPSU	PES
過濾杯蓋	PP	PP
杯蓋孔塞	Silicone	Silicone
針頭式過濾器	PTFE	PTFE




MF 3, MF 3 Pro
300 ml 磁式過濾漏斗



MF 5, MF 5 Pro
500 ml 磁式過濾漏斗



MF 3a, MF 3a Pro
300 ml 磁式過濾漏斗

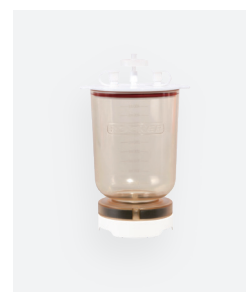

MF 5a, MF 5a Pro
500 ml 磁式過濾漏斗



200300-01-P	MF 3 Pro, 300 ml PPSU 磁式過濾漏斗
200300-01	MF 3, 300 ml PES 磁式過濾漏斗
200500-01-P	MF 5 Pro, 500 ml PPSU 磁式過濾漏斗
200500-01	MF 5, 500 ml PES 磁式過濾漏斗
200310-01-P	MF 3a Pro, 300 ml PPSU 磁式過濾漏斗
200310-01	MF 3a, 300 ml PES 磁式過濾漏斗
200510-01-P	MF 5a Pro, 500 ml PPSU 磁式過濾漏斗
200510-01	MF 5a, 500 ml PES 磁式過濾漏斗
200300-36	PP 過濾杯蓋
167110-16	8 號矽膠塞
167100-52	PALL, GN-6 微生物檢驗濾膜 (47 mm, 0.45 µm, 200/PK)
167100-20	PALL, A/E 玻璃纖維濾紙 (47 mm, 1 µm, 100/PK)

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rock.com.tw
sales@rock.com.tw

