

不鏽鋼過濾瓶組



觀看影片



可高壓滅菌



產品保固



SF 10



SF 30

產品特色


- ▶ 旋卡式扣緊方式，快速、牢固、不需夾具
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗，堅固耐用，可火焰快速滅菌
- ▶ 接收瓶設計浮球防溢保護，防止水滿被抽入幫浦中
- ▶ 二年產品保固 (SF 漏斗)

產品應用

一般性過濾，如培養液過濾，或微生物檢驗等需火焰快速滅菌者

產品規格

材質	SF 10	SF 30
過濾杯	SS316	SS316
過濾基座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接收瓶	PC	PC
規格		
漏斗容積	100 mL	300 mL
接收瓶容積	1200 mL	1200 mL
濾膜直徑	47 mm	47 mm
有效過濾面積	11.6 cm ²	11.6 cm ²
適用軟管內徑	ID8	ID8
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes

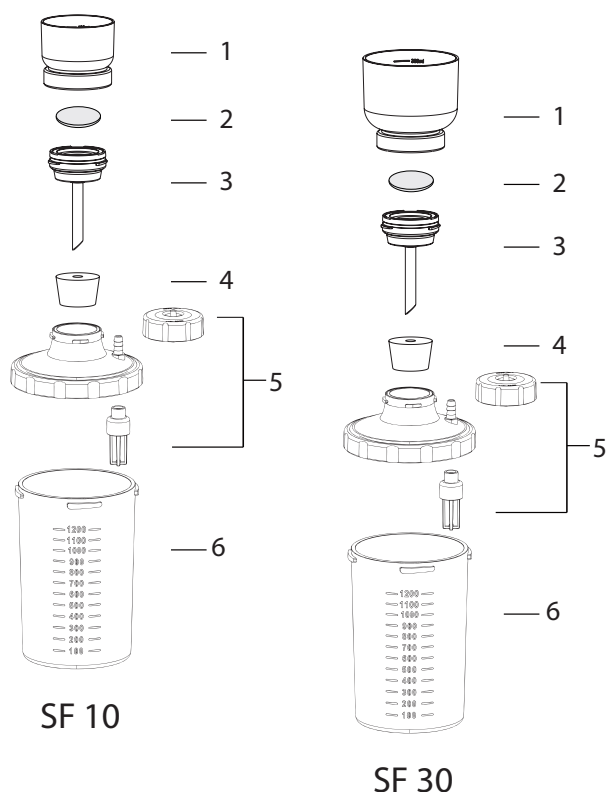

SF 10

SF 30

訂購資訊

SF 10 不鏽鋼過濾瓶組		197010-32
1	不鏽鋼過濾杯 100 mL	180100-01
2	不鏽鋼濾膜墊片	180100-31
3	不鏽鋼過濾基座	180100-00
4	16 號矽膠塞	167110-17
5	PC 廢液瓶蓋組	197000-32-PC
6	PC 廢液瓶 1200 mL	197000-31-PC
SF 30 不鏽鋼過濾瓶組		197010-33
1	不鏽鋼過濾杯 300 mL	180100-03
2	不鏽鋼濾膜墊片	180100-31
3	不鏽鋼過濾基座	180100-00
4	16 號矽膠塞	167110-17
5	PC 廢液瓶蓋組	197000-32-PC
6	PC 廢液瓶 1200 mL	197000-31-PC