

不鏽鋼多連過濾座



觀看影片



可高壓滅菌

2年
產品保固

產品特色

► 極速拆裝設計

MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

► SS316 不鏽鋼材質，堅固耐用

MultiVac 300 / 600 - MS 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。

► Quick-Fit 接頭設計

MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，以符合各實驗室的設置需求。

► 可調式補氣閥

可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。

► 獨立控制開關

MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

► 可搭配各式過濾漏斗

MultiVac 300 / 600 - MS 過濾座內含 8 號矽膠塞，可搭配各品牌的過濾漏斗使用。

► 二年產品保固

產品應用

- 微生物檢測
- 水中懸浮固體檢測
- 實驗室真空過濾

訂購資訊

180300-01

MultiVac 300 - MS, 3 連不鏽鋼過濾座

180600-01

MultiVac 600 - MS, 6 連不鏽鋼過濾座


200300-01

MF 3 磁式過濾漏斗 300 mL

167110-16

8 號矽膠塞

MultiVac 300 - MS

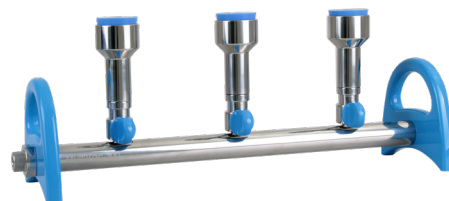

可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

MultiVac 600 - MS



產品規格

型號	MultiVac 300 - MS	MultiVac 600 - MS
過濾孔數	3	6
適用濾膜直徑	依過濾漏斗	依過濾漏斗
漏斗容量	依過濾漏斗	依過濾漏斗
適用軟管內徑	ID8	ID8
淨重	3.0 Kg	5.1 Kg
尺寸 (LxWxH)	48 x 13 x 16 cm	85 x 13 x 16 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS316	SS316
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾杯轉接座	SS316	SS316
接頭 / 補氣閥	SS316	SS316
手把 / 旋鈕	鋁合金	鋁合金
O-ring	FKM, 矽膠	FKM, 矽膠

* 濾液經過材質為鋁合金、FKM