

過濾瓶組配件



PES / PC 真空瓶

規格	PES 真空瓶 1200 mL	PC 真空瓶 1200 mL
料號	197000-11	197000-11-PC
液位刻度間距	100 mL	100 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes
廢液抽取轉接蓋	Yes	Yes
適用軟管內徑	ID8	ID8
高溫高壓滅菌	Yes	Yes



多層過濾轉接器

規格	多層過濾轉接器
料號	167230-05
本體材質	PTFE
濾膜墊片材質	不鏽鋼濾網
適用濾膜直徑	47 mm
適用漏斗	(選配) 玻璃過濾漏斗 300 mL
高溫高壓滅菌	Yes



Hoop 圓形固定架

規格	圓形固定架	圓形固定架
料號	167300-37	189300-37
適用幫浦	Rocker 300 / 400 / 410 Rocker 300C / 400C / 410C	Rocker 300 / 400 / 410 Rocker 300C / 400C / 410C
適用過濾瓶組	LF 30 / SF 10 / SF 30	VF 12
適用瓶組直徑	Max. 118 mm	Max. 103 mm



濾膜 (Membrane Filters) **NEW**

規格	玻璃纖維濾紙	MCE 濾膜
料號	167100-20	167100-52-1
廠牌	Pall	Whatman
濾膜直徑	47 mm	47 mm
濾膜孔徑	1 μ m	0.45 μ m
濾膜材質	玻璃纖維	MCE
包裝	100/PK	100/PK

* PES : Polyethersulfone, PC : Polycarbonate, PP : Polypropylene

過濾瓶組配件



GL45 過濾轉接座

規格	GL45 過濾轉接座
料號	197000-65
瓶蓋材質	PP
墊片材質	PTFE
適用矽膠塞	8 號矽膠塞
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8
高溫高壓滅菌	Yes



GL45 抽氣血清瓶蓋 **NEW**

Specification	GL45 抽氣血清瓶蓋	SC45 抽氣血清瓶蓋	SC45 抽氣血清瓶蓋組
料號	197000-60	197000-61-P2N	197000-61-P2
瓶蓋材質	PP	PP	PP
墊片 / O-ring 材質	矽膠	EPDM	EPDM
浮球防溢保護裝置	-	-	Yes
適用軟管內徑	ID6	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8
高溫高壓滅菌	Yes	Yes	Yes

SC45 抽氣血清瓶蓋 GL45 血清瓶應用方案



►廢液瓶

搭配幫浦及其他配件可用於接收水質檢驗過濾完的液體、或是細胞培養液的廢液收集。



►乾燥瓶

血清瓶內置入乾燥劑，可吸收過濾或乾燥實驗時所產生的水氣、保護真空幫浦。




►緩衝瓶

連接於真空幫浦及過濾裝置中間、防止過濾完的液體被抽入真空幫浦內。




►吸附瓶

瓶身內添加適當的中和或是緩衝液，可中和或吸附實驗時所產生的酸、鹼及有機溶劑氣體，以保護實驗室環境或幫浦。

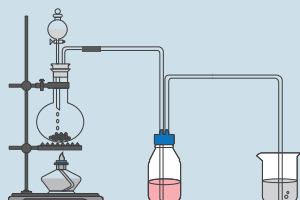

►輸送、保存瓶

連接管路用於接收或是輸送液體，以進行分裝或是保存。

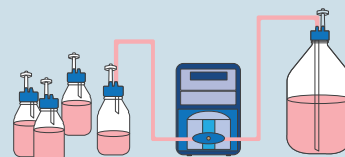

* 參考 P.92 選購更多 GL45 玻璃血清瓶