

微生物專用
分配型蠕動幫浦

精確分注，簡單操作！



符合 ISO 7218 規範

產品特色



專為微生物設計

1

內建微生物常用容器及分配體積，直覺操作

- ◆ 試管 (2.5 mL, 5 mL, 9 mL)
- ◆ 培養皿 (15 mL, 18 mL, 20 mL)
- ◆ 血清瓶 (90 mL, 225 mL, 450 mL)



手持分注器

2

- ◆ 符合人體工學設計，輕鬆握拿，一按即分注
- ◆ 灌裝針頭可進行高溫高壓滅菌，無污染疑慮
- ◆ 磁吸設計，可直接吸附於主機上，方便收納



精確分配

3

- ◆ 可分配體積 1 mL ~ 9999 mL，且具回吸功能，
- ◆ 可降低分配誤差

產品應用

- ◆ 微生物檢測 培養基分配、緩衝液、稀釋液分配、各種無菌溶液分配
- ◆ 生醫液體分配 血液、蛋白質、緩衝液、液態藥物等
- ◆ 藥劑學



國際認證


CE / RoHS / IP 33



微生物專用



▲ 專為微生物設計之分配功能

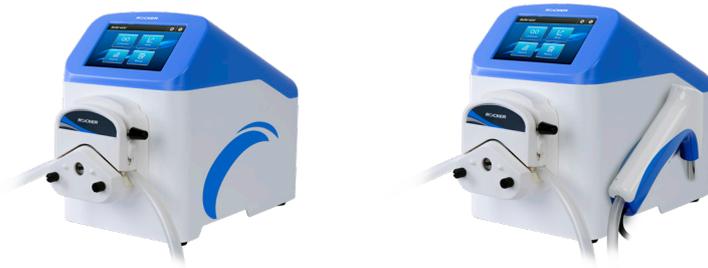

產品規格

型號	Buller 600	Buller 600 - DSP
技術數據		
轉速	1 ~ 600 rpm	
轉速精確度	1 %	
最大流量	1950 mL/min	
控制模式	數位變速	
通道數	1	
手持分注器	選配	(標配) 具啟 / 停控制功能
淨重	5.5 Kg	5.8 Kg
尺寸 (LxWxH)	17 x 33 x 24 cm	20 x 33 x 24 cm
電氣數據		
電壓	100-240V	
頻率	50 / 60Hz	
最大功率	80W	
馬達	步進馬達	
外控輸入	0~5V / 4~20mA / 0~10kHz	
通訊功能	RS 232	
安全性	保險絲	

管子	內徑	壁厚	TYGON S3™ E-3603	Biosicon	PHARMED® BPT	分注器配件包
						
16#	3.1 mm	1.6 mm	185600-48	185600-55	184100-48	185600-51-16
25#	4.8 mm	1.6 mm	185600-54	185600-57	185600-50	185600-51-25
17#	6.4 mm	1.6 mm	185600-53	185600-56	185600-49	185600-51-17



185601-01(02)	Buller 600 分配型蠕動幫浦 · AC100-240V, 50/60Hz · 美規插頭 (歐規插頭)
185601-01(02)-DSP	Buller 600 - DSP 分配型蠕動幫浦 · AC100-240V, 50/60Hz · 美規插頭 (歐規插頭)
184100-15	一般流速泵浦頭 · ~1950 mL/min
184100-20	高流速泵浦頭 · ~2130 mL/min
185600-10	DSP 分注器 · DB9 接頭 · 2 m
185600-41	腳踏開關 · DB9 接頭 · 2 m

RO-BRO185-TC202511-A01

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

