

直接排水式真空過濾系統



影片介紹

產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間
WaterVac 200 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間
內建抽水幫浦，直接排出濾液，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 符合 ISO 8199 法規方法
每台 WaterVac 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，並提供穩定的流速，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。（*ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南）
- ▶ 多功能平台
WaterVac 200 主機可配合實驗需求，更換各式過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 41 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 一年產品保固



360 度旋轉排水接頭



可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗
(矽膠塞式、旋卡式及拋棄式)

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

190210-01(02)

WaterVac 200 - MS 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器（歐規插頭變壓器）

200300-01

MF 3, 300 ml 磁式過濾漏斗

200500-01

MF 5, 500 ml 磁式過濾漏斗

產品規格

型號	WaterVac 200
電源	DC24V, 1.8A
最大真空度	313 mbar
最大液體流量	4.5 L/min
馬達	60W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限
噪音值	60 dB
適用軟管內徑	ID8
濾液經過材質	Stainless steel, FKM, Silicone, PP, PPS
主機重量	2.8 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	21.4 x 18.3 x 26.4 cm
	WaterVac 200 - MS
過濾孔數	2
連接基座	矽膠塞式
過濾漏斗	選配 MF 3 / MF 5 磁式過濾漏斗 300 ml / 500 ml

直接排水式真空過濾系統



影片介紹

產品特色

- ▶ **模組化設計，節省 70% 桌面空間**
WaterVac 200 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ **直接排水，節省時間**
內建抽水幫浦，直接排出濾液，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ **符合 ISO 8199 法規方法**
每台 WaterVac 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，並提供穩定的流速，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。（*ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南）
- ▶ **SS316 不鏽鋼過濾漏斗**
WaterVac 200 - MB 可搭配 100, 300, 500 ml 三種尺寸過濾杯，SS316 不鏽鋼材質可火焰快速滅菌。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
IP 41 防護等級
RoHS 認證

- ▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

190220-01(02)

WaterVac 200 - MB 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器（歐規插頭變壓器）

190221-01(02)

WaterVac 201 - MB 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器（歐規插頭變壓器）

180100-01

100 ml SF 不鏽鋼過濾杯

180100-03

300 ml SF 不鏽鋼過濾杯

180100-05

500 ml SF 不鏽鋼過濾杯



專利編號：I653396

WaterVac 200 - MB



專利編號：I653396

WaterVac 201 - MB

產品規格

型號	WaterVac 200	
電源	DC24V, 1.8A	
最大真空度	313 mbar	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	ID8	
濾液經過材質	Stainless steel, FKM, Silicone, PP, PPS	
主機重量	2.8 Kg	
主機尺寸 (LxWxH)	21.4 x 18.3 x 26.4 cm	
	WaterVac 200 - MB	WaterVac 201 - MB
過濾孔數	2	2
連接基座	旋卡式	旋卡式
過濾漏斗	選配 SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml / 300 ml / 500 ml	標配 SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml X 2

直接排水式 - 真空過濾系統及配件

選擇適合的 *WaterVac 200* 產品組合

A



WaterVac 200 - MB
(190220-01/02)

B



WaterVac 200 - MS
(190210-01/02)



Rocker, 100 ml
SF 不鏽鋼過濾杯
(180100-01)



Rocker, 300 ml
SF 不鏽鋼過濾杯
(180100-03)



Rocker, 500 ml
SF 不鏽鋼過濾杯
(180100-05)



100 ml
SF 不鏽鋼過濾杯蓋
(180100-11)



300 ml / 500 ml
SF 不鏽鋼過濾杯蓋
(180100-13)



Rocker, 300 ml
MF 3, 磁式過濾漏斗
(200300-01)



Rocker, 500 ml
MF 5, 磁式過濾漏斗
(200500-01)




客製化設計

我們可以提供您
客製化過濾設備



WaterVac 200
(190200-01/02)

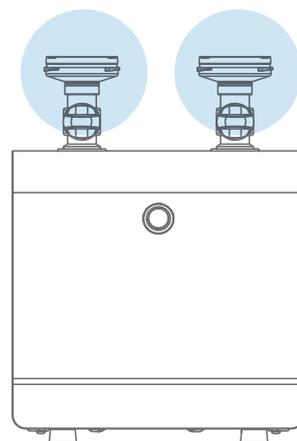

Sartorius, 100 ml / 250 ml
Microsart® 拋棄式過濾杯
(16A07-10-----N/
16A07-25-----N)



Millipore, 100 ml / 250 ml
Microfil® 拋棄式過濾杯
(MIHAWG100 / MIHAWG250)



Pall, 100 ml / 250 ml
Sentino® 拋棄式過濾杯
(4870 / 4871)

+



Sartorius 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-74)

+



Millipore 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-73)

+



Pall 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-75)

* SS316過濾杯轉接座僅適用於上述提及的拋棄式過濾杯