

直接排水式真空過濾系統

產品特色

- ▶ 大量樣品過濾設計

MultiVac 310 / 610 - MS - A 是為大量樣品過濾所設計的新穎又經濟的組合，每組包含 Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦、鋁製多孔過濾座及 MF 磁式過濾漏斗。依需求可選購各式濾膜。
- ▶ 直接排水設計，省空間，省時間

MultiVac 310 / 610 - MS - A 的真空源內建抽水幫浦，可直接與過濾裝置連接，將過濾後的廢水直接排出，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間；並且免除倒水、清潔等繁瑣步驟，簡化流程，加速實驗進行。
- ▶ 極速拆裝，輕巧實惠

MultiVac 過濾座每個組件皆能快速拆裝，便於清潔、滅菌、更換。整組過濾座採用鋁合金材質製作，輕巧且實惠。
- ▶ 磁式過濾漏斗，輕鬆單手操作

磁式過濾漏斗的磁吸式設計，在操作過程能單手操作，不因放下手中器具而中斷實驗。
- ▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 懸浮固形物檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180311-01(02)-A

180611-01(02)-A

MultiVac 310 / 610 - MS - A

直接排水式真空過濾系統包含：

*Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦

*MultiVac 310 / 610 - MS, 3/6 孔鋁製過濾座

*MF 3, 300 ml 磁式漏斗 (3 pcs/6 pcs)

*高壓矽膠管 2 pcs

MultiVac 310 - MS - A



MultiVac 610 - MS - A



產品規格

型號	Alligator 200	
供應電源	DC 24V, 2.5A	
最大真空度	313 mbar/ 70 kPa / 525 mmHg	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	5/16 inch (8 mm)	
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PPS	
型號	MultiVac 310 - MS	MultiVac 610 - MS
過濾孔數	3	6
濾膜直徑	47 mm	47 mm
過濾漏斗	MF 3, 300 ml x 3	MF 3, 300 ml x 6
多孔過濾座本體材質	Aluminum	Aluminum

直接排水式真空過濾系統

產品特色

大量樣品過濾設計

MultiVac 301 / 601 - MB - A 是專為大量微生物檢驗所設計的組合，每組均包含 Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦、不鏽鋼多孔過濾座、100 ml 不鏽鋼過濾杯、電子點火本生燈及微生物檢測專用濾膜。

直接排水設計，省空間，省時間

MultiVac 301 / 601 - MB - A 的真空源內建抽水幫浦，可直接與過濾裝置連接，將過濾後的廢水直接排出，不需廢液瓶，節省 40% 的桌面空間；並且免除倒水、清潔等繁瑣步驟，簡化流程，加速實驗進行。

極速拆裝設計，SS316不鏽鋼製作

MultiVac 過濾座每個組件皆能快速拆裝，便於清潔、滅菌、更換；與液體接觸部分皆採 SS316 不鏽鋼製作，抗腐蝕能力強，可快速火焰滅菌。

一年產品保固

產品應用

- ◆ 懸浮固形物檢測
- ◆ 微生物檢測
- ◆ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180301-01(02)-A

180601-01(02)-A

MultiVac 301 / 601 - MB - A

直接排水式真空過濾系統包含：

*Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦

*MultiVac 300 / 600 - MB,

3/6 孔不鏽鋼過濾座

*100 ml SS 不鏽鋼過濾杯 (3 pcs/6 pcs)

*Dragon 100 電子點火式本生燈

*Pall GN - 6 MCE 濾膜 (0.45 μm), 200/PK

*高壓矽膠管 2 pcs

MultiVac 301 - MB - A



MultiVac 601 - MB - A



產品規格

型號	Alligator 200	
供應電源	DC 24V, 2.5A	
最大真空度	313 mbar/ 70 kPa / 525 mmHg	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	5/16 inch (8 mm)	
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PPS	
型號	MultiVac 301 - MB	MultiVac 601 - MB
過濾孔數	3	3
濾膜直徑	47 mm	47 mm
過濾杯	SS 不鏽鋼過濾杯(100 ml x 3)	SS 不鏽鋼過濾杯(100 ml x 6)
多孔過濾座本體材質	SS316	SS316

多孔過濾座組合與配件

選擇適合的 *MultiVac* 產品組合

A

1. 選擇 MultiVac MB 過濾座



MultiVac 300 - MB
3孔不鏽鋼過濾座
(180300-02)



MultiVac 600 - MB
6孔不鏽鋼過濾座
(180600-02)

B

1. 選擇 MultiVac MS 過濾座



MultiVac 300-MS
3孔不鏽鋼過濾座
(180300-01)



MultiVac 600-MS
6孔不鏽鋼過濾座
(180600-01)

2. 選擇適合的不鏽鋼過濾杯



Rocker, 100 ml
SS 不鏽鋼過濾杯
(167103-61)



Rocker, 300 ml
SS 不鏽鋼過濾杯
(167103-63)



Rocker, 500 ml
SS 不鏽鋼過濾杯
(167103-65)



100 ml
SS 不鏽鋼過濾杯蓋
(167103-11)



300 ml
SS 不鏽鋼過濾杯蓋
(167103-13)



500 ml
SS 不鏽鋼過濾杯蓋
(167103-15)

2. 選擇適合的過濾漏斗



Rocker, 300 ml
MF 3 磁式過濾漏斗
(200300-01)




Rocker, 500 ml
MF 5 磁式過濾漏斗
(200500-01)



Rocker, 300ml
VF 6 玻璃過濾漏斗
(167120-31)



1. 選擇 MultiVac 過濾座

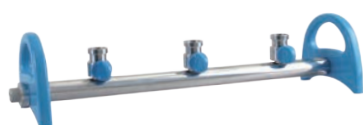

MultiVac 300
3孔不鏽鋼過濾底座
(180300-00)



MultiVac 600
6孔不鏽鋼過濾底座
(180600-00)



2. 選擇適合的拋棄式漏斗與轉接座



Sartorius, 100 ml
拋棄式過濾杯
(16A07)



Millipore, 100 / 250 ml
Microfl, 拋棄式過濾杯
(MIACFD101 / MIACFD201)



Pall, 100 ml / 250 ml
拋棄式過濾杯
(4870 / 4871)

+

+

+



Sartorius 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-74)



Millipore 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-73)



Pall 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-75)

客製化設計

我們可以提供您
客製化過濾設備

