

超音波清洗機

產品特色

- ▶ **脫氣功能**
Soner 系列產品標準配備脫氣功能，有助於排出水中氣泡，增強清洗效果。
- ▶ **工業用振盪子**
Soner 系列產品使用工業用振盪子，功率強且使用壽命長。
- ▶ **53KHz 高頻率**
Soner 系列產品使用 53 KHz 頻率能夠更精密的清除在小裂縫間難以清除的物質。
- ▶ **內外槽均不鏽鋼材質**
Soner 系列產品內槽以及外槽均使用不鏽鋼 SS304 材質，耐用性強，容易擦拭且不易生鏽。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
- ▶ **一年產品保固**



Soner 203



Soner 203H



Soner 206



Soner 206H

產品應用

- ▶ 溶劑脫氣
- ▶ 比色槽、比色管清洗
- ▶ 光學鏡片、科學儀器清洗
- ▶ 醫療工具清潔
- ▶ 工業製品、組件、半成品清潔

訂購資訊

188203-11(22)

Soner 203 超音波清洗機
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

188204-11(22)

Soner 203H 超音波清洗機 (可加熱)
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

188206-11(22)

Soner 206 超音波清洗機
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

188207-11(22)

Soner 206H 超音波清洗機 (可加熱)
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

產品規格

型號	Soner 203	Soner 203H	Soner 206	Soner 206H
頻率	53KHz	3KHz	53KHz	53KHz
加熱功能	-	室溫 ~ 60°C	-	室溫 ~ 60°C
脫氣功能	Yes	Yes	Yes	Yes
時間設定	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min
內槽尺寸 (LxWxD)	24 x 14 x 10 cm	24 x 14 x 10 cm	30 x 15 x 15 cm	30 x 15 x 15 cm
外槽尺寸 (LxWxD)	27 x 16 x 24 cm	27 x 16 x 24 cm	33 x 18 x 29 cm	33 x 18 x 29 cm
容量	3L	3L	6L	6L
外殼材質	內外皆不鏽鋼	內外皆不鏽鋼	內外皆不鏽鋼	內外皆不鏽鋼
排水系統	-	-	-	-
不鏽鋼蓋	Yes	Yes	Yes	Yes
超音波功率	100W	100W	180W	180W
加熱功率	-	75W	-	150W
脫氣功率	100W	100W	180W	180W
包裝尺寸 (LxWxD)	36.5 x 27.5 x 34.5 cm	36.5 x 27.5 x 34.5 cm	43.5 x 28.5 x 40 cm	43.5 x 28.5 x 40 cm
淨重	4.0 Kg	4.2 Kg	5.0 Kg	5.6 Kg
總重量	4.6 Kg	4.8 Kg	6.0 Kg	6.6 Kg

超音波清洗機

產品特色

- ▶ **脫氣功能**
Soner 系列產品標準配備脫氣功能，有助於排出水中氣泡，增強清洗效果。
- ▶ **工業用振盪子**
Soner 系列產品使用工業用振盪子，功率強且使用壽命長。
- ▶ **53KHz 高頻率**
Soner 系列產品使用 53 KHz 頻率能夠更精密的清除在小裂縫間難以清除的物質。
- ▶ **內外槽均不鏽鋼材質**
Soner 系列產品內槽以及外槽均使用 SS304 不鏽鋼材質，耐用性強，容易擦拭且不易生鏽。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
- ▶ **一年產品保固**



Soner 210



Soner 210H



Soner 220



Soner 220H

產品應用

- ▶ 溶劑脫氣
- ▶ 比色槽、比色管清洗
- ▶ 光學鏡片、科學儀器清洗
- ▶ 醫療工具清潔
- ▶ 工業製品、組件、半成品清潔

訂購資訊

188210-11(22)

Soner 210 超音波清洗機
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

188211-11(22)

Soner 210H 超音波清洗機 (可加熱)
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

188220-11(22)

Soner 220 超音波清洗機
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)


188221-11(22)

Soner 220H 超音波清洗機 (可加熱)
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

產品規格

型號	Soner 210	Soner 210H	Soner 220	Soner 220H
頻率	53KHz	53KHz	53KHz	53KHz
加熱功能	-	室溫 ~ 60°C	-	室溫 ~ 60°C
脫氣功能	Yes	Yes	Yes	Yes
時間設定	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min
內槽尺寸 (LxWxD)	30 x 24 x 15 cm	30 x 24 x 15 cm	50 x 30 x 15 cm	50 x 30 x 15 cm
外槽尺寸 (LxWxD)	36 x 27 x 31 cm	36 x 27 x 31 cm	57 x 33 x 33 cm	57 x 33 x 33 cm
容量	10L	10L	20L	20L
外殼材質	SS304	SS304	SS304	SS304
排水系統	Yes	Yes	Yes	Yes
不鏽鋼蓋	Yes	Yes	Yes	Yes
超音波功率	200W	200W	500W	500W
加熱功率	-	270W	-	520W
脫氣功率	200W	200W	500W	500W
包裝尺寸 (LxWxD)	43.5 x 37.5 x 40 cm	43.5 x 37.5 x 40 cm	66.5 x 43.5 x 43 cm	66.5 x 43.5 x 43 cm
淨重	6.8 Kg	7.0 Kg	13.6 Kg	13.8 Kg
總重量	8.4 Kg	8.6 Kg	15.4 Kg	15.6 Kg

超音波清洗機配件

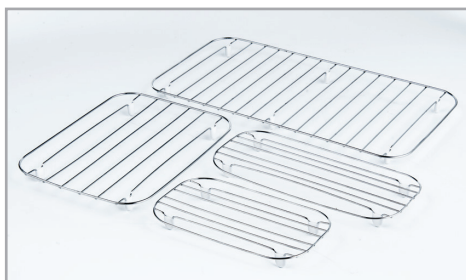

托盤 (標配)
用以放置較大型的物件



洗籃 (選配)
用以放置小型多量物件



燒杯固定架 (選配)
用以間接清洗時
固定裝洗劑的燒杯

訂購資訊

- 188203-31** 托盤 (Bracket) for Soner 203/203H
- 188206-31** 托盤 (Bracket) for Soner「Γ」 206/206H
- 188210-31** 托盤 (Bracket) for Soner 210/210H
- 188220-31** 托盤 (Bracket) for Soner 220/220H
- 188203-30** 洗籃 (Basket) for Soner 203/203H
- 188206-30** 洗籃 (Basket) for Soner 206/206H
- 188210-30** 洗籃 (Basket) for Soner 210/210H
- 188220-30** 洗籃 (Basket) for Soner 220/220H
- 188200-31** 燒杯固定蓋 (S) for Soner 203/203H/206/206H
- 188200-32** 燒杯固定蓋 (M) for Soner 210/210H
- 188200-33** 燒杯固定蓋 (L) for Soner 220/220H