

# 直接排水式真空過濾系統



## 產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間  
WaterVac 100 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間  
內建抽水幫浦，可直接將濾液排出，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 多功能平台  
WaterVac 100 主機可配合實驗需求，更換各式過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗。
- ▶ 能搭配各大廠的拋棄式漏斗  
WaterVac 100 能搭配各大廠的拋棄式過濾杯，讓各種過濾實驗及微生物檢測更加方便快速。
- ▶ 國際認證  
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 一年產品保固



直接排水設計



可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 190100-01(02)

WaterVac 100 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

### 190110-01(02)

WaterVac 100 - MS 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

### 200300-01

MF 3, 300 ml 磁式過濾漏斗

### 200500-01

MF 5, 500 ml 磁式過濾漏斗

## 產品規格

型號	WaterVac 100
電源	DC12V, 1.0A
最大真空度	313 mbar
最大液體流量	0.5 L/min
馬達	12W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限
適用軟管內徑	ID6
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PA66
主機重量	1.16 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	17 x 12 x 9.6 cm
型號	WaterVac 100 - MS
過濾孔數	1
連接基座	矽膠塞式
過濾漏斗	選配 MF 3 / MF 5 磁式過濾漏斗 300 ml / 500 ml

# 直接排水式真空過濾系統



影片介紹

## 產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間  
WaterVac 100 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間  
內建抽水幫浦，可直接將濾液排出，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 多功能平台  
WaterVac 100 主機可配合實驗需求，更換各式過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗。
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗  
WaterVac 100 - MB 可搭配 100, 300, 500 ml 三種尺寸過濾杯，SS316 不鏽鋼材質可火焰快速滅菌。
- ▶ 國際認證  
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 一年產品保固

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 190100-01(02)

WaterVac 100 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器（歐規插頭變壓器）

### 190120-01(02)

WaterVac 100 - MB 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器（歐規插頭變壓器）

### 190121-01(02)

WaterVac 101 - MB 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器（歐規插頭變壓器）

### 180100-01

100 ml SF 不鏽鋼過濾杯

### 180100-03

300 ml SF 不鏽鋼過濾杯

### 180100-05

500 ml SF 不鏽鋼過濾杯

## WaterVac 100 - MB



## WaterVac 101 - MB



## 產品規格

型號	WaterVac 100	
電源	DC12V, 1.0A	
最大真空度	313 mbar	
最大液體流量	0.5 L/min	
馬達	12W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限	
適用軟管內徑	ID6	
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PA66	
主機重量	1.16 Kg	
主機尺寸 (LxWxH)	17 x 12 x 9.6 cm	
型號	WaterVac 100 - MB	WaterVac 101 - MB
過濾孔數	1	1
連接基座	旋卡式	旋卡式
過濾杯	選配 SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml / 300 ml / 500 ml	標配 SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml

# 直接排水式 - 真空過濾系統及配件

選擇適合的 *WaterVac 100* 產品組合

**A**



WaterVac 100-MB  
(190120-01/02)

**B**



WaterVac 100 - MS  
(190110-01/02)



Rocker, 100 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯  
(180100-01)



Rocker, 300 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯  
(180100-03)



Rocker, 500 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯  
(180100-05)



100 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯蓋  
(180100-11)



300 ml / 500 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯蓋  
(180100-13)



Rocker, 300 ml  
MF 3, 磁式過濾漏斗  
(200300-01)



Rocker, 500 ml  
MF 5, 磁式過濾漏斗  
(200500-01)


C



WaterVac 100  
(190100-01/02)

## 客製化設計

我們可以提供您  
客製化過濾設備

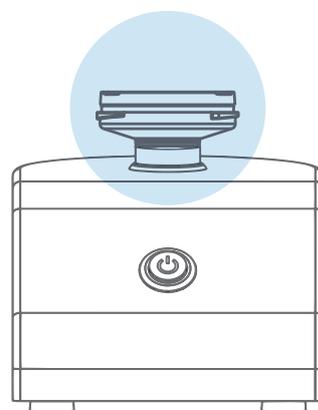

Sartorius, 100 ml / 250 ml  
Microsart® 拋棄式過濾杯  
(16A07--10-----N/  
16A07--25-----N)



Millipore, 100 ml / 250 ml  
Microfil® 拋棄式過濾杯  
(MIHAWG100 / MIHAWG250)



Pall, 100 ml / 250 ml  
Sentino® 拋棄式過濾杯  
(4870 / 4871)



矽膠管  
Ø 4.2 x 8 mm, 200 cm  
(199100-68)

+

+

+

+



Sartorius 拋棄式  
過濾杯轉接座  
(190100-74)



Millipore 拋棄式  
過濾杯轉接座  
(190100-73)



Pall 拋棄式  
過濾杯轉接座  
(190100-75)



SS316 插心接頭  
(ID4 ~ ID8)  
(190100-76)

\* SS316過濾杯轉接座僅適用於上述提及的拋棄式過濾杯