

# 不鏽鋼旋卡式過濾瓶組



SF 10



SF 30

## 產品特色


- ▶ 全新旋卡式扣緊方式 (M577346)，快速、牢固、不需夾具
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗，堅固耐用，可火焰快速滅菌
- ▶ 接收瓶設計浮球防溢保護，防止水滿被抽入幫浦中

## 產品應用

一般性過濾，如培養液過濾，或微生物檢驗等需火焰快速滅菌者

## 產品規格

材質	SF 10	SF 30
過濾杯	SS316	SS316
過濾基座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接收瓶	PC	PC
規格		
漏斗容積	100 ml	300 ml
接收瓶容積	1200 ml	1200 ml
濾膜直徑	47 mm	47 mm
適用軟管內徑	ID8	ID8
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes

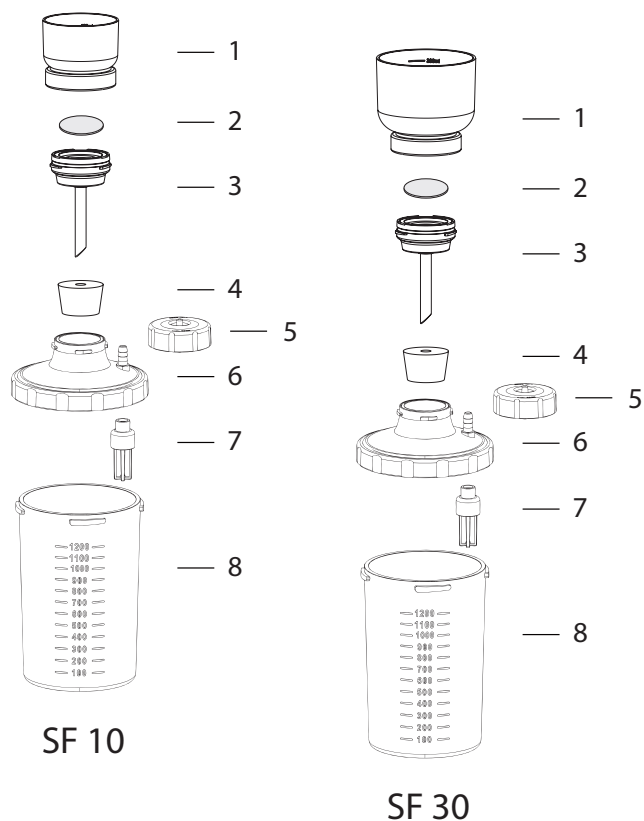

## 訂購資訊

SF 10, 不鏽鋼過濾瓶組		197010-32
100 ml 不鏽鋼過濾漏斗		
1	100 ml 不鏽鋼過濾杯	180100-01
2	不鏽鋼濾膜墊片	180100-31
3	47 mm 不鏽鋼過濾基座	180100-00
4	16 號矽膠塞	167110-17
5	PP 黑色上蓋	197000-40
6	1200 ml, PC 廢液瓶蓋	197000-32-PC
7	浮球防溢保護裝置	197000-39
8	1200 ml, PC 廢液瓶	197000-31-PC
SF 30, 不鏽鋼過濾瓶組		197010-33
300 ml 不鏽鋼過濾漏斗		
1	300 ml 不鏽鋼過濾杯	180100-03
2	不鏽鋼濾膜墊片	180100-31
3	47 mm 不鏽鋼過濾基座	180100-00
4	16 號矽膠塞	167110-17
5	PP 黑色上蓋	197000-40
6	1200 ml, PC 廢液瓶蓋	197000-32-PC
7	浮球防溢保護裝置	197000-39
8	1200 ml, PC 廢液瓶	197000-31-PC



# 不鏽鋼旋卡式過濾瓶組



SF 11



SF 52

## 產品特色

- ▶ 全新旋卡式扣緊方式 (M577346)，快速、牢固、不需夾具
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗，堅固耐用，可火焰快速滅菌
- ▶ 快速排水型接收瓶，可直接排水，省去拆卸管線等步驟

## 產品應用

微生物檢驗等需火焰快速滅菌者


## 產品規格

材質	SF 11	SF 52
過濾杯	SS316	SS316
過濾基座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
瓶塞	矽膠	矽膠
快速排水型接收瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃
排水管	橡膠 (不可滅菌)	橡膠 (不可滅菌)

## 規格

漏斗容積	100 ml	500 ml
接收瓶容積	1000 ml	2000 ml
濾膜直徑	47 mm	47 mm
適用軟管內徑	ID8	ID8
排水裝置	Yes	Yes

\* 接收瓶可耐約 1 mbar，建議僅用於真空過濾

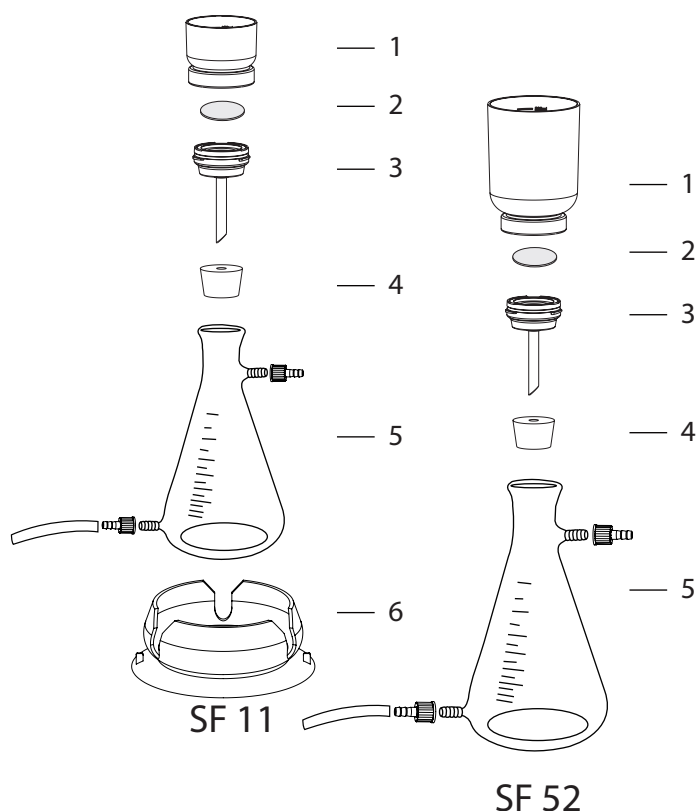

## 訂購資訊

SF 11, 不鏽鋼過濾瓶組		167200-02
SF 1, 100 ml 不鏽鋼過濾漏斗		180100-10
1	100 ml 不鏽鋼過濾杯	180100-01
2	不鏽鋼濾膜墊片	180100-31
3	47 mm 不鏽鋼過濾基座	180100-00
4	8 號矽膠塞	167110-16
5	1000 ml 快速排水型接收瓶 (含: 側邊螺紋接頭)	167300-08
6	接收瓶固定吸盤	167200-45
SF 52, 不鏽鋼過濾瓶組		167200-11
500 ml 不鏽鋼過濾漏斗		
1	500 ml 不鏽鋼過濾杯	180100-05
2	不鏽鋼濾膜墊片	180100-31
3	47 mm 不鏽鋼過濾基座	180100-00
4	18 號矽膠塞	167110-18
5	2000 ml 快速排水型接收瓶 (含: 側邊螺紋接頭)	167200-13