

菌落計數器



影片介紹

2年
產品保固

產品特色

▶ 壓感設計，無汙染

Galaxy 330 採用壓力感應設計，每秒至多感應 7 下，並可使用各種計數筆，不破壞樣品，無污染的疑慮。

▶ 四面顯示窗

Galaxy 330 具有一大三小，共四個顯示螢幕，可同時顯示當次及前三個計數值。

▶ 貼心操作設計

- (1) 多重複平均鍵，由軟體直接將多重複平均，免除人為計算。
- (2) 倒退計數鍵，避免誤觸計數，影響結果。
- (3) 培養皿圓盤及扣片，適用多種尺寸培養皿。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 二年產品保固

產品應用

▶ 微生物菌落計數

總生菌數
大腸桿菌數

訂購資訊

175330-01(02)

Galaxy 330 菌落計數器，AC100~240V 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

175331-01(02)


Galaxy 330 菌落計數器，AC100~240V 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器) (含專用軟體和電腦連接線)

175330-12

Galaxy 330 專用軟體配件組 (含 USB (8G) 和電腦連接線)

Galaxy 330

專利編號 : M483958

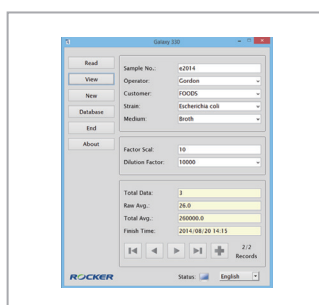

Galaxy 330 專用軟體 (選配)

可換算稀釋倍率並儲存實驗數據，並同時能夠針對資料進行編輯，協助做成報告的格式，列印出數據以方便使用。

產品規格

型號	Galaxy 330
顯示螢幕	3 位數，LED 面板
放大倍數	2~3 倍
適用培養皿尺寸	直徑 60 mm 或 90 mm ~ 150 mm (可調整)
儲存紀錄	100 組
操作按鍵	平均、歸零、倒退計數
光源亮度	可調整，LED 燈
壓力敏感度	可調整
計數聲響	可調整
輸出方式	USB
主機重量	5.6 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	35.1 x 30.2 x 37 cm