

LF 旋卡式過濾漏斗



影片介紹

121°C / 1 bar / 20 min
AUTOCLAVABLE

產品特色


- ▶ 專利旋卡扣緊方式，快速、牢固、不需夾具
- ▶ PES 工程塑膠射出成型，耐摔、耐高溫 (180°C)，可高溫高壓滅菌
- ▶ 濾膜墊片設計導流溝，可增進過濾速率
- ▶ 可重複使用，減少資源浪費，節省經費
- ▶ LF 3 / 5 附 8 號矽膠塞，可搭配各種接收瓶
- ▶ LF 3a / 5a 專利雙向結合設計可搭配多種 GL45 血清瓶

推薦用於不需要經常高溫高壓滅菌之應用，如一般實驗室及環境實驗室

產品規格

材質	LF 3 / LF 5	LF 3a / LF 5a
過濾杯	PES	PES
過濾基座	PC	PC
濾膜墊片	PP	PP
過濾杯蓋	PP	PP
過濾杯蓋孔塞	矽膠	矽膠
針頭式過濾器	PTFE	PTFE

規格	LF 3 / LF 5	LF 3a / LF 5a
漏斗容積	300 mL / 500 mL	300 mL / 500 mL
濾膜直徑	47 mm	47 mm
有效過濾面積	12.5 cm ²	12.5 cm ²
針頭式過濾器	25 mm, 0.2 μm	25 mm, 0.2 μm
適用軟管內徑	-	ID8

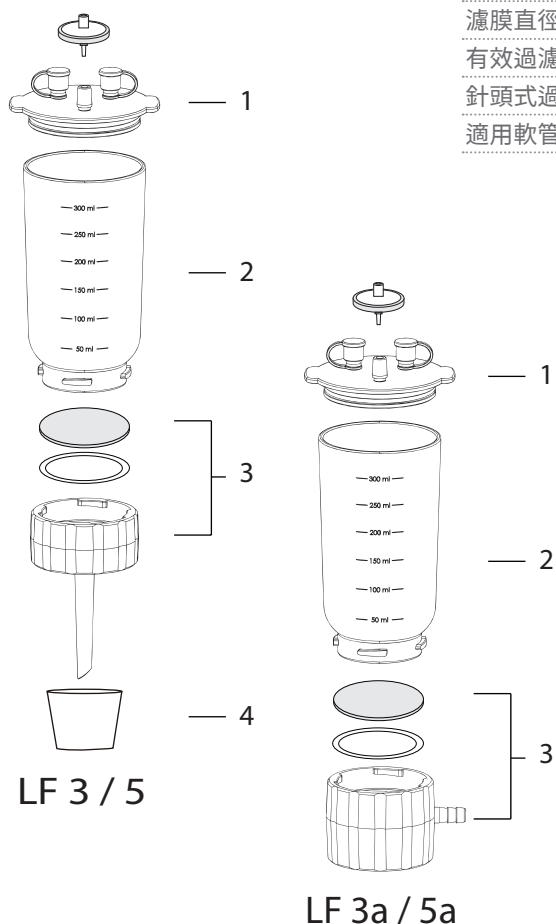

訂購資訊

LF 3, PES 旋卡式過濾漏斗 300 mL	197000-01
LF 5, PES 旋卡式過濾漏斗 500 mL	197000-06
1 PP 過濾杯蓋 (LF 3)	197000-36
PP 過濾杯蓋 (LF 5)	200300-36
2 PES 旋卡式過濾杯 300 mL	197000-34
PES 旋卡式過濾杯 500 mL	197000-56
3 47 mm PC 旋卡式過濾基座	197000-35
4 8 號矽膠塞	167110-16
LF 3a, PES 旋卡式過濾漏斗 300 mL	197000-02
LF 5a, PES 旋卡式過濾漏斗 500 mL	197000-07
1 PP 過濾杯蓋 (LF 3a)	197000-36
PP 過濾杯蓋 (LF 5a)	200300-36
2 PES 旋卡式過濾杯 300 mL	197000-34
PES 旋卡式過濾杯 500 mL	197000-56
3 血清瓶轉接過濾座	197000-38