

旋卡式不鏽鋼多連過濾座



影片介紹



2年

產品保固

產品特色

- ▶ **極速拆裝設計**
MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **SS316 不鏽鋼材質**
MultiVac 301 / 601 - MB 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。
- ▶ **Quick-Fit 接頭設計**
MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，以符合各實驗室的需求。
- ▶ **可調式補氣閥**
MultiVac 301 / 601 - MB 多連過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。
- ▶ **獨立控制開關**
MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。
- ▶ **二年產品保固**

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180301-02

MultiVac 301 - MB, 3 連不鏽鋼過濾座
(含 SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL x 3)

180601-02

MultiVac 601 - MB, 6 連不鏽鋼過濾座
(含 SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL x 6)

180100-01

SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL


180100-03

SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL

180100-05

SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL

MultiVac 301 - MB

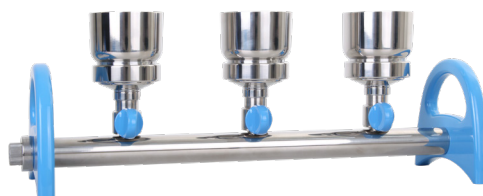

可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

MultiVac 601 - MB



產品規格

型號	MultiVac 301 - MB	MultiVac 601 - MB
過濾孔數	3	6
適用濾膜直徑	47 mm	47 mm
搭配過濾杯容量	100 mL	100 mL
適用軟管內徑	ID8	ID8
淨重	3.7 Kg	6.6 Kg
尺寸 (LxWxH)	48 x 13 x 14.3 cm	85 x 13 x 14.3 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS316	SS316
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾杯轉接座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接頭 / 補氣閥	SS316	SS316
手把 / 旋鈕	鋁合金	鋁合金
濾杯	SS316	SS316