

旋轉多連過濾座

2年

產品保固

產品特色

▶ 旋轉盤設計

旋轉盤設計方便操作，並可有效降低交叉污染。盤面印刷可清晰辨識樣品，方便追蹤也可減少錯誤取樣的可能性。

▶ 節省 60% 空間

相較於一般直排式多連座 (MultiVac 600) 可節省約 60% 空間，適合放置於無菌操作台中使用。

▶ 材質耐用

SolarVac 與液體接觸的部份採用 SS316 及矽膠材質，堅固耐用且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。

▶ 獨立控制開關

SolarVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

▶ 國際認證

RoHS 認證

▶ 二年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

186600-01

SolarVac 600 - MS，
6 連旋轉矽膠塞式過濾座

186600-02

SolarVac 600 - MB，
6 連旋轉旋卡式過濾座
(不含不鏽鋼過濾杯)

180100-01

SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL

180100-03

SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL

180100-05

SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL

200300-01

MF 3 磁式過濾漏斗 300 mL


200500-01

MF 5 磁式過濾漏斗 500 mL

SolarVac 600 - MS



獲得專利

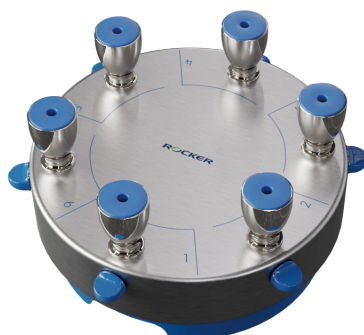

可調式補氣閥

SolarVac 600 - MB



獲得專利



產品規格

型號	SolarVac 600 - MS	SolarVac 600 - MB
過濾孔數	6	6
適用濾膜直徑	依過濾漏斗	47 mm
搭配過濾杯容量	依過濾漏斗	(選配) 100 mL / 300 mL / 500 mL
適用軟管內徑	ID8	ID8
淨重	8.6 Kg	8.4 Kg
尺寸(LxWxH)	ø 34 x 18 cm	ø 34 x 14 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS304	SS304
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾杯轉接座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接頭 / 補氣閥	SS316	SS316
旋鈕	鋁合金	鋁合金
連接管	矽膠	矽膠