

 **DRAGON 本生燈**

實驗滅菌。超有實力

專業可靠 / 焰力穩定 / 簡單安全



產品特色



簡單安全

- 1**
- ◆ 採用壓電點火裝置，一點即燃
 - ◆ 額外的安全鎖，提供雙重保護 (Dragon 100)



焰力穩定

- 2**
- ◆ 優化的瓦斯進氣設計，使丁烷可以充足供應，並提供穩定的火焰
 - ◆ 最高可燃燒至 1300°C 並持續 60 分鐘



專業可靠

- 3**
- ◆ 金屬製底座可使重心穩固且不易傾倒
 - ◆ 符合 CE 安全規範


產品應用

- ◆ 微生物滅菌
- ◆ 物理實驗




國際認證

CE

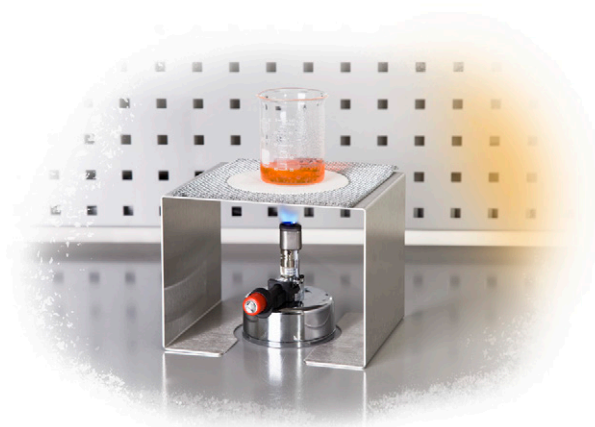

- ▲ 燒杯架搭配陶瓷纖維網，可幫助熱能均勻傳導。
燒杯架最大承重1300g。

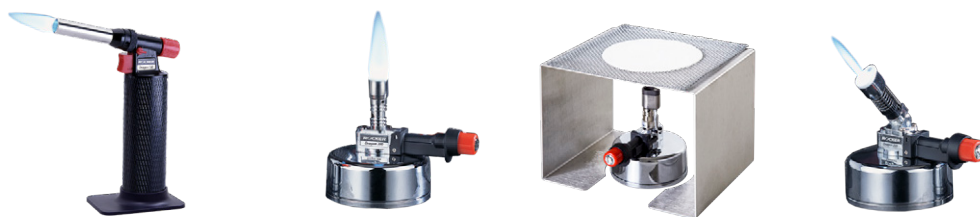

產品規格

型號	Dragon 100	Dragon 200	Dragon 200 - T	Dragon 220
最高溫度	1300°C	1300°C	1300°C	1300°C
燃料容量	40 g	35 g	35 g	35 g
連續工作時間	60 min	60 min	60 min	60 min
安全開關	Yes	-	-	-
燒杯架	-	-	Yes, SS304	-
陶瓷纖維網	-	-	Yes	-
尺寸 (L x W x H)	7.9 x 13.7 x 16.1 cm	7.9 x 11.5 x 9.2 cm	15 x 17.3 x 13.4 cm	7.8 x 11.5 x 9.4 cm
淨重	380 g	407 g	1235 g	425 g

請觀看產品影片



Dragon 100



Dragon 200/220



177100-00	Dragon 100 電子點火式本生燈
177200-00	Dragon 200 電子點火式本生燈
177220-00	Dragon 220 電子點火式本生燈
177200-T	Dragon 200 - T 本生燈套件組，包含 * Dragon 200 電子點火式本生燈 * 燒杯架 * 陶瓷纖維網 (14 x 14 cm)
177200-10	燒杯架
177200-12	陶瓷纖維網 (14 x 14 cm)

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

