

# SC45 抽氣血清瓶蓋

## 簡單·安全·多功能

### 產品特色



#### 簡單、安全

- ◆ 分離式設計，無需卸除管線即可旋開瓶蓋
- ◆ 瓶蓋組 ② 標配浮球防溢裝置，保護幫浦不進水



#### 相容性高

- ◆ 採用標準 GL45 螺紋，可與任何 GL45 血清瓶相容
- ◆ 斜角接頭設計防止管線彎曲，液體流動更順暢



#### 可高溫高壓滅菌

- ◆ 採 PP 材質及 EPDM o-ring 製成，耐熱可達 121°C，堅固耐用



規格	① SC45 抽氣血清瓶蓋	② SC45 抽氣血清瓶蓋組
料號	197000-61-P2N	197000-61-P2
螺紋	GL45	GL45
瓶蓋材質	PP	PP
O-ring 材質	EPDM	EPDM
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8
浮球防溢保護裝置	-	Yes
高溫高壓滅菌	Yes	Yes



# SC45 抽氣血清瓶蓋

## GL45 血清瓶應用方案



### 廢液瓶

搭配幫浦及其他配件可用於接收水質檢驗過濾完的液體、或是細胞培養液的廢液收集。




### 乾燥瓶

血清瓶內置入乾燥劑，可吸收過濾或乾燥實驗時所產生的水氣、保護真空幫浦。




### 吸附瓶

瓶身內添加適當的中和或是緩衝液，可中和或吸附實驗時所產生的酸、鹼及有機溶劑氣體，以保護實驗室環境或幫浦。

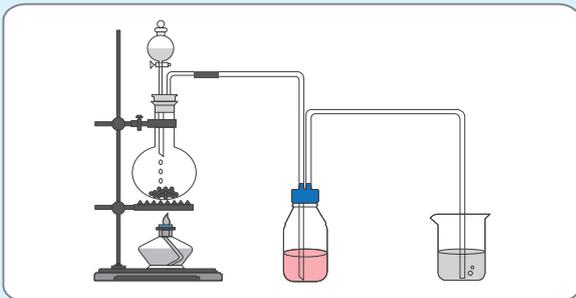

### 輸送、保存瓶

連接管路用於接收或是輸送液體，以進行分裝或是保存。

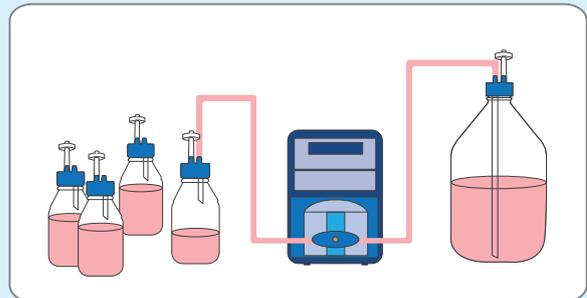

### 緩衝瓶

連接於真空幫浦及過濾裝置中間、防止過濾完的液體被抽入真空幫浦內。



### 訂購資訊

- |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 197000-61-P2N | SC45 抽氣血清瓶蓋                     |
| 197000-61-P2  | SC45 抽氣血清瓶蓋組 (含浮球)              |
| 197100-10SCN  | PP 真空瓶 1000 mL (含 SC45 抽氣血清瓶蓋)  |
| 197100-10SC   | PP 真空瓶 1000 mL (含 SC45 抽氣血清瓶蓋組) |
| 167200-38     | 矽膠管 (6 x 12 mm), 100 cm         |
| 199100-68     | 矽膠管 (4.2 x 8 mm), 200 cm        |